

Aivia 100

A-MIP 100 Installationshandbok och bruksanvisning



Allmän information

Viktigt:

Läs den här bruksanvisningen innan Aivia installeras och tas i bruk. Läs det här avsnittet noga och följ anvisningarna.

Garantin gäller inte för skador som uppstått på grund av att de här anvisningarna inte följts.

Aivia-skyddsenheterna är skyddande väggelement som används för att hålla och skydda AED (automatisk extern defibrillator). Eftersom Aivia-skyddsenheter inte kontrollerar AED är återförsäljaren ensam ansvarig för kontroll och måste informera sina egna underåterförsäljare och användare om att det är upp till dem att kontrollera att AED är i korrekt skick och inte tagits bort genom fysiska kontroller på plats. Beroende på de valda alternativen kommer Aivia-skyddselement att aktivera lokala visuella och akustiska larm. Larmet är bara tillfälligt och kommer endast att vara aktivt under själva incidenten. Inga incidentloggar spelas in. Arbetsförhållandena och förekomsten av AED som finns inuti Aivia-skyddsenheterna kan på inga villkor kontrolleras på distans. Aivia-enheten kan på inga villkor ersätta de kontroller som rekommenderas av defibrillatorns tillverkare. Enheten bör endast installeras av kvalificerade personer eller personer som godkänts av Aivia-enheten.

Installera aldrig Aivia så att den utsätts för direkt solljus.

Aivia-modellen utan värmare ska installeras på en uppvärmd plats enligt anvisningarna från hjärtstartarens tillverkare.

Aivia med värmare ska installeras på en plats som fyller kraven för Aivias drifttemperaturer. Det är viktigt att säkerställa att temperaturlarmen åtgärdas.

Aivias egenskaper kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillverkaren av Aivia förbehåller sig rätten att ändra produkten när som helst utan krav på att ändra produkter som tidigare levererats.

Varumärket AIVIA är ett registrerat varumärke.

Säkerhet

- För att undvika risken för brand eller elstötar får ingen öppen låga finnas i närheten av Aivia.
- Lämna ett område på 13 cm runt omkring Aivia fritt för att säkerställa en god ventilation.
- Håll Aivia på avstånd från element eller andra värmekällor. Se till så att Aivia inte placeras ovanpå andra apparater som kan alstra värme. Se till att inte placera någonting under Aivia.
- För att undvika skador ska inga föremål föras in i ihålligheterna.
- Installera aldrig Aivia så att den utsätts för direkt solljus.

- Utsätt inte Aivia för vatten när dörren är öppen.

- Fästet ska anpassas till den typ av hållare som Aivia ska fästas vid.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om fästet är otillräckligt eller för olyckshändelser eller skador som inträffar under infästningen.

Garanti

Ta inte isär de delar som utgör Aivia.
För inte in några föremål i ihålligheterna.

Endast kunnig personal får utföra reparationer på Aivia.

Om detta inte följs ogiltigförklaras alla garantier, uttryckta såväl som underförstådda.


All användning som uttryckligen är förbjuden, eller sammansättningar som inte rekommenderas i den här bruksanvisningen, leder till att garantin ogiltigförklaras.

Miljöinformation

- Vid eventuell retur av Aivia ska den kompletta originalförpackningen användas.

- Lägg inte Aivia och dess förpackningsmaterial tillsammans med hushållsavfallet. Använd det återvinningssystem som finns i ditt område. Användning av återvinningssystem hjälper till att bevara miljö och hälsa.

- Aivia kan innehålla batterier som svarar mot de europeiska direktiven 2006/66/CE och 2008/103/CE. De får inte läggas i vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilket återvinningssystem för använda batterier som finns i ditt område. Korrekt avfallshantering av använda batterier hjälper till att bevara miljö och hälsa.

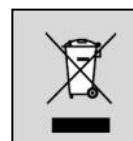

Underhåll

OBS!

**AIVIA KAN INNEHÅLLA BATTERIER.
EXPLOSIONSRISK FÖREKOMMER OM
BATTERIERNA SOM SITTE I AIVIA BYTS UT MOT
BATTERIER AV FELAKTIG TYP.**

**ENDAST KVALIFICERAD PERSONAL FÅR UTFÖRA
UNDERHÅLL, SÄRSKILT BATTERIBYTE.**

Sammanfattning

Installation

Viktigt	4
Beskrivning av Aivia	4
ID-märkning	4
Öppna Aivia första gången	4
Fästa Aivia	5
Sätta i batterierna i Aivia	6
Installera hjärtstartaren	7
Montera plomberingarna	7
Bilder	7

Användning

Nattlägets funktion	8
Larmfunktioner	8
Använda Aivia	8
Efter användning av hjärtstartaren	8
Underhåll av Aivia	8

Felsökning

9

Specifikationer

Mekaniska egenskaper	10
Tekniska egenskaper	10
Överensstämmelser	10



Installation

Viktigt

Läs hela den här bruksanvisningen noga innan Aivia installeras och tas i bruk.


Installera aldrig Aivia så att den utsätts för direkt solljus. Det finns risk för att hjärtstartaren utsätts för alltför höga temperaturer.

Beskrivning av Aivia

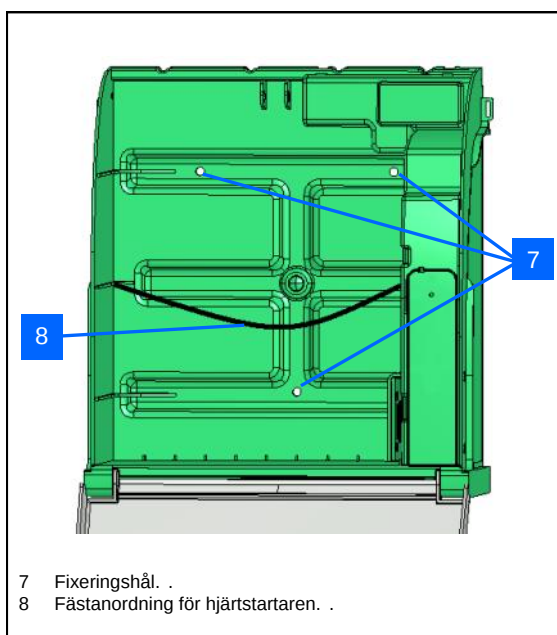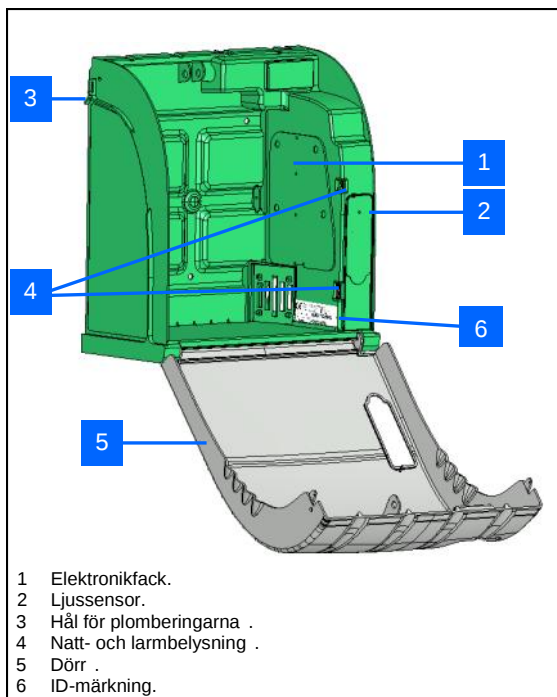

ID-märkning


- ID-märkningen finns på en etikett på Aivias insida.

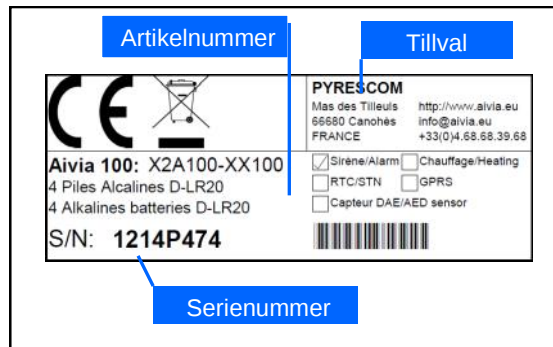

- Vid all kommunikation med kundtjänst ska du ha din Aivias artikelnummer och serienummer tillgängliga.

Öppna Aivia första gången

- För att öppna dörren till Aivia innan Aivia installerats vid våggen behövs en liten skruvmejsel.
- Låt skruvmejseln glida in mellan Aivias dörr och kåpa.
- Lyft upp skruvmejseln och var försiktig så att du inte repar någonting.

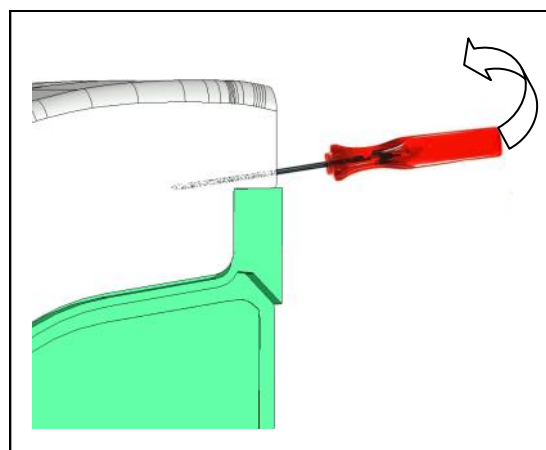


- Gör det här på båda sidor om Aivia.

Installation


Fästa Aivia

Installera aldrig Aivia så att den utsätts för direkt solljus. Aivia ska installeras på en uppvärmd plats enligt anvisningarna från hjärtstartarens tillverkare.


- Aivia ska installeras av en person som har nödvändiga yrkesmässiga kunskaper och som följer Bornavie.
- Om Aivia installeras i ett offentligt utrymme eller i ett område med förbipasserande ska ett område på golvet (avgränsat) eller en pelare förberedas så att förordningen av den 15 januari 2007 "Tekniska föreskrifter om tillträde till vägar" Artikel N°6-D, följs.
- Fästet ska anpassas till den typ av hållare som Aivia ska fästas vid.
- Lämna ett fritt arbetsutrymme runt Aivia, som visas i bilden nedan.
- De exakta måtten på Aivia finns i slutet av det här dokumentet i avsnittet Specifikationer.

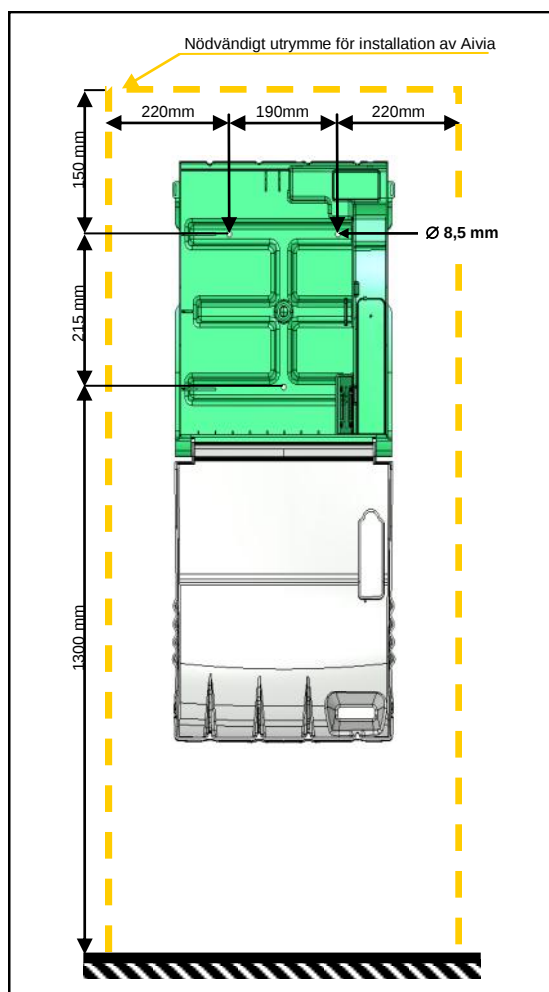


- Lämna ett fritt utrymme på 140 cm från Aivias vägghållare så att dörren kan öppnas lätt.

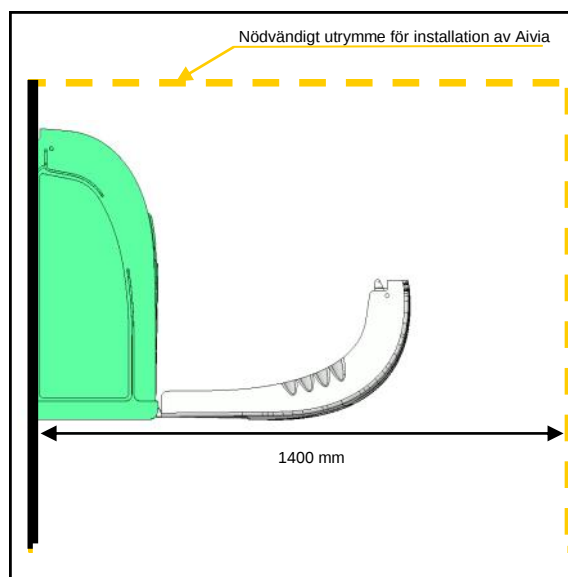

- Använd borrarshablonen som medföljer förpackningen för att markera fixeringshål på väggen.

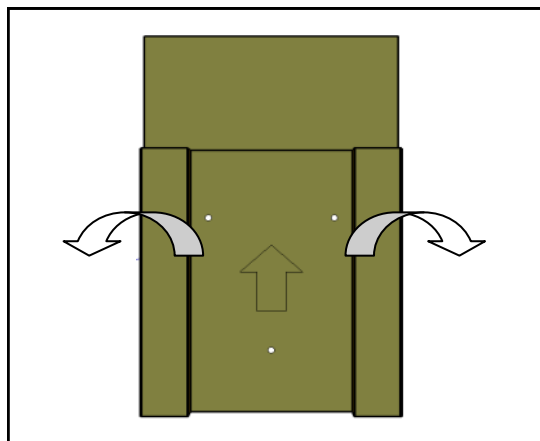


- Lägga borrarshablonen mot väggen med pilen mot dig och riktad uppåt.

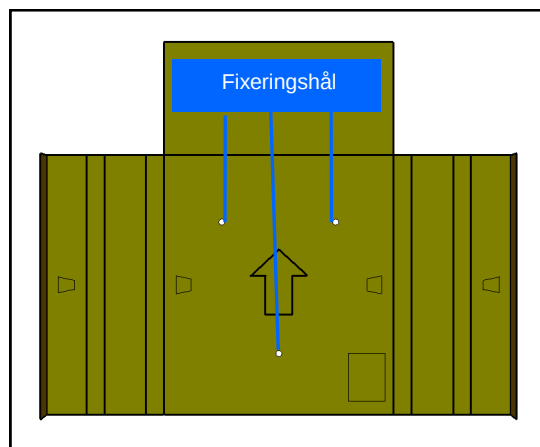

Installation

- Använd en fästenhet som är anpassad till det slags hållare som Aivia är fäst vid.
- Fästet bör kunna tåla en belastning på minst 20 kg.


- Exempel på fäste:

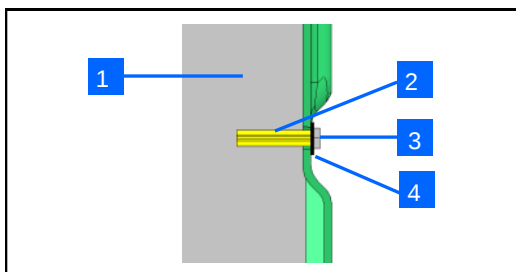

- 1 Hållare.
 - 2 Expanderskruv.
 - 3 Fästskruvar, minst M6, högst M8 .
 - 4 Flat bricka Ø 14 mm max .
- Bricka och skruvhuvud ska tillsammans inte vara tjockare än 8 mm.


Fäst Aivia i de tre fixeringshålén.

Sätta i batterierna i Aivia

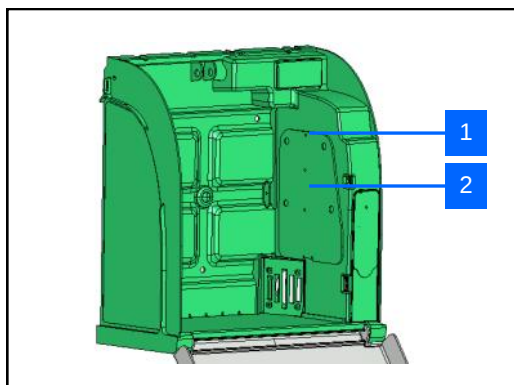


- 1 Fästskruv för luckan.
- 2 Lucka för åtkomst till batterierna .


- Skruva loss fästskruven till luckan med en kryssmejsel.
- Lyft luckan uppåt. Var försiktig så att du inte drar i strömkabeln.

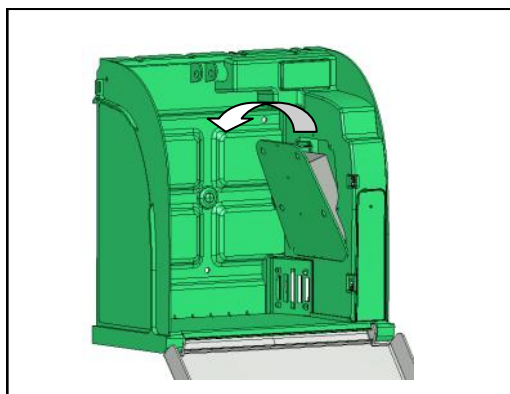


- Sätt i de 4 medföljande batterierna D-LR20. Var noga med polariteten som anges i botten av batterifacket.

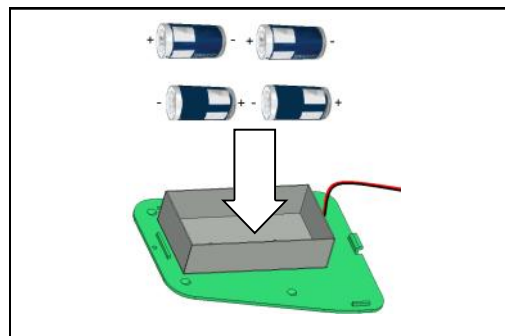

- Kontrollera att Aivia får spänning genom att kontrollera att de röda varningslamporna blinkar.

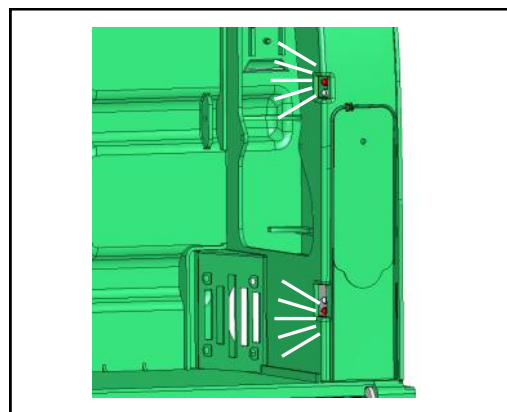


- Sätt tillbaka luckan genom att föra in den lägre delen.
- Skruva i luckans fästskruv med en kryssmejsel.

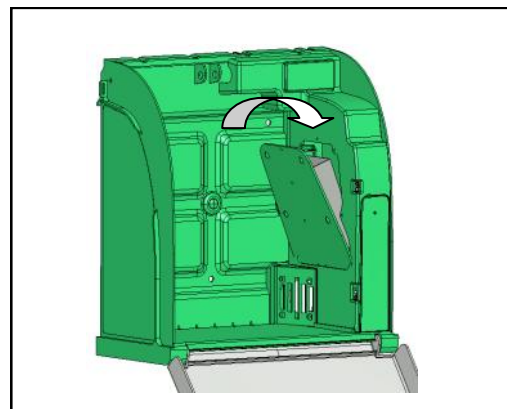

Installation

Installera hjärtstartaren

- Dra i hjärtstartarens fästeanordning och låt hjärtstartaren glida ner i botten på Aivia.

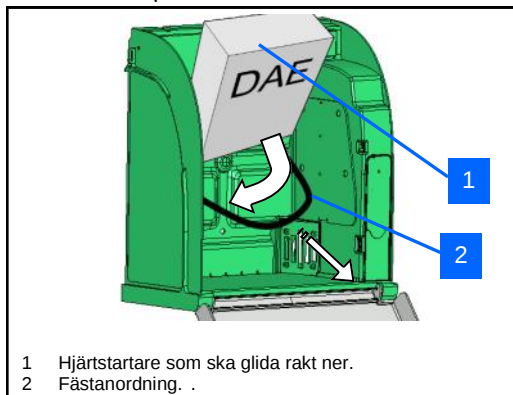


- Med fästeanordningen kan hjärtstartaren enkelt dras ut i nödfall samtidigt som hjärtstartaren stöds.

Montera plomberingarna


- Aivia levereras med två omgångar plomberingar.
- Plomberingarna visar om dörren öppnats.
- Kontrollera plomberingarnas tillstånd regelbundet.

Installera förseglingarna


- Stäng porten till Aivia-enheten helt. Kontrollera att du drar basen av porten mot dig innan du flyttar porten

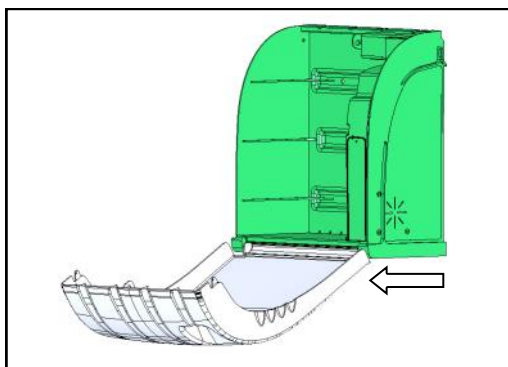


- Det bindande området måste vara rent, torrt och fettfritt.

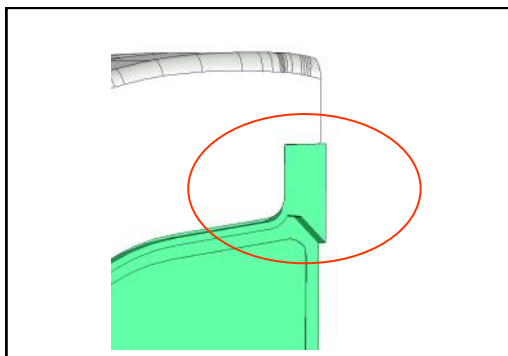


- Ta bort tätningens skyddsfilm.

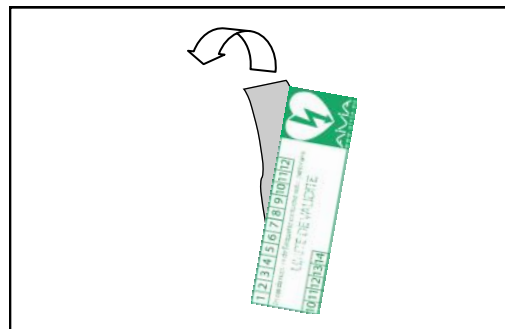

- Fäst tätningen på porten och Aivia-enhetens ram.

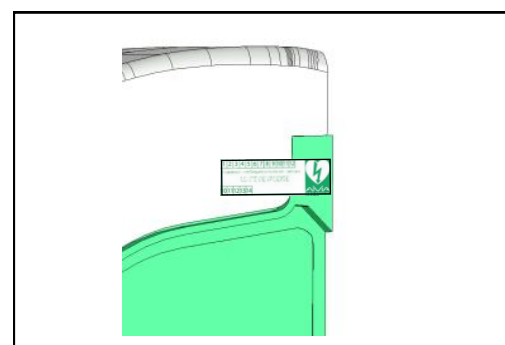


- Placera tätningarna på båda sidor om Aivia-enheten.

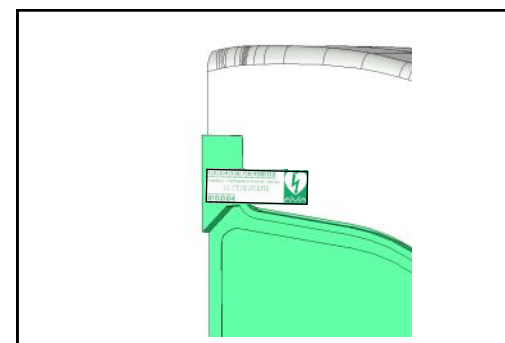

Bilder

- Bilderna på Aivias dörr visar hur man ska förfara vid ett nödfall.

- Under SOS ska du skriva in nödnumret om det inte står där redan.

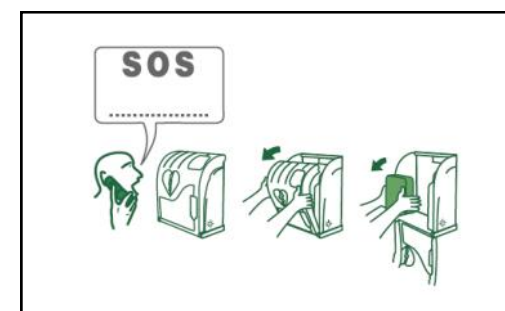

Användning

Nattlägets funktion

- Aivia har en ljusgivare. När ljuset blir otillräckligt blinkar de vita lamporna så att man kan hitta Aivia.

Larmfunktioner

- När dörren öppnas ges ett visuellt larm genom att de röda lamporna blinkar.
- Om din Aivia är utrustad med ett ljudlarm (artikelnummer X2A100-XX100) aktiveras detta under ungefär 3 minuter.
- Stäng dörren för att avaktivera larmet.

Använda Aivia

Om du blir vittne till en händelse som kräver hjärtstartare.

• Kontakta larmcentralen.


Tala med hög och tydlig röst. Beskriv situationen utan att glömma av att tala om var olyckan hänt.



• Öppna dörren till Aivia genom att dra i den.

Det visuella larmet visas genom att de röda lamporna blinkar.

Om din Aivia är utrustad med ljudlarm •

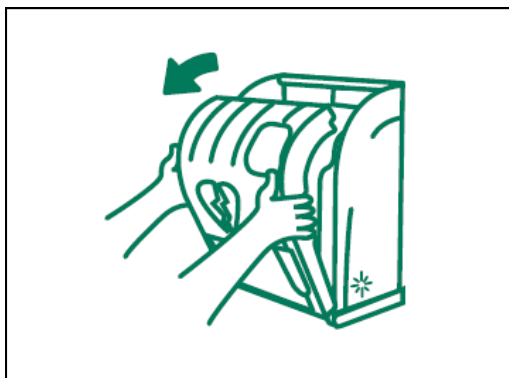

• Fatta hjärtstartaren.



• Gå fram till den drabbade.

• Slå på hjärtstartaren.

• Följ anvisningarna på hjärtstartaren.

Efter användning av hjärtstartaren

- Sätt inte tillbaka hjärtstartaren i Aivia utan att ha återställt funktionen.

- Följ anvisningarna i hjärtstartarens bruksanvisning för hur man återställer funktionen.

- Er samarbetspartner kan hjälpa dig att återställa funktionen. Tveka inte att kontakta dem.

- När hjärtstartarens funktion återställts installeras hjärtstartaren i Aivia igen enligt anvisningarna i avsnittet "Installera hjärtstartaren".

- Montera plomberingarna enligt anvisningarna i avsnittet "Montera plomberingarna".

Underhåll av Aivia

- Rengör ytorna på Aivia med en mjuk, fuktad trasa. Torka av Aivia med en ren och torr trasa. Använd inte kemiska produkter eller rengöringsmedel eftersom de kan skada Aivia.

- Gnugga inte Aivia med något hårt föremål eftersom det finns risk att du repar eller skadar ytorna permanent.

- Använd inte högtrycksspruta.

- Kontrollera plomberingarnas tillstånd regelbundet.

- Om Aivias plomberingar har forcerats ska du säkerställa att alla delar på hjärtstartaren finns på plats samt att den fungerar som den ska. Vid tveksamheter ska du kontakta hjärtstartarens återförsäljare.

Felsökning

- När batterierna sätts i blinkar inte de röda lamporna.

1. Kontrollera polariteten när batterierna sätts i.
2. Kontrollera strömkabelns anslutning till batterifacket.
3. Byt ut batterierna.
4. Kontakta er samarbetspartner.

- De vita lamporna blinkar inte, eller bara svagt, vid nattläge.

1. Byt ut batterierna.
2. Kontakta er samarbetspartner.

- De röda lamporna blinkar inte när jag öppnar dörren.


1. Byt ut batterierna.
2. Kontakta er samarbetspartner.

- Ljudlarmet aktiveras inte när jag öppnar dörren.

1. Kontrollera på ID-märkningen om ljudlarm finns med som tillval.
2. Byt ut batterierna.
3. Kontakta er samarbetspartner.

Specifikationer

Mekaniska egenskaper

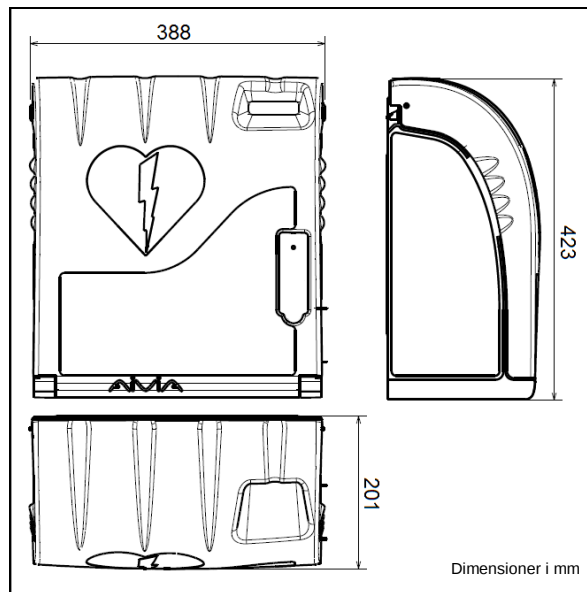

- Vikt inklusive batterier
 - X2A200-XX000: 3,3 kg.
 - X2A100-XX100 (med ljudlarm): 3,6 kg.
- Material
 - Dörr: polykarbonat.
 - Kåpa: ABS.
 - Fäste: ABS.
 - Lucka : ABS.

Tekniska egenskaper

- Strömförsörjning
4 D-LR20 alkaliska batterier, minimum 13 amperetimmar.
- Strömförbrukning:
 - X2A100-XX000:
Minst: 0,8 mA
Högst: 75 mA
 - X2A100-XX100 (med ljudlarm):
Minst: 0,8 mA
Högst: 450 mA
Ljudstyrka: 90 dB / 1 meter.
- Drifftid:
Mer än 1 år (12 timmar nattläge).
- Arbetstemperatur och fuktighet:
Lägst temperatur : 0°C.
Högst temperatur : 40 °C.
Relativ fuktighet: max 95 %, utan kondensering
- Maximal höjd: 2000m.
- Högsta tillåtna vikt: 5 Kg

Överensstämmelser

X2A100-XX*:**
EN 55022:2006
EN 55024:1998 / A1:2001 / A2:2003

U2A100-XX*:**
IEC 60950-1:2005 / A1:2009
EN 61000-6-2:2005 / A1:2006
EN 61000-6-3:2007 / A1:2011

Anteckningar

www.aivia.eu

info@aivia.eu

2013-02-27



A - M I P 1 0 0 - S E - 2 0 3